

# GEMINI



**Nowej generacji** wózek stwarzający ogromne możliwości różnych regulacji. W standardowej wersji: pasy na ramiona, klin, zagłówek.

**Nowoczesny design** nie pozostawia żadnych złudzeń, jest to wózek, który rodzice potrzebują nie tylko ze względu na jego znakomitą funkcjonalność, ale także z powodu jego wyglądu.

Możliwość płynnej zmiany nachylenia siedziska i oparcia, jednocześnie i niezależnie.

Ta cecha pozwala na ułożenie dziecka w pozycji najbardziej wygodnej oraz wzmacnia stabilizację.

Regulacja wysokości oparcia oraz głębokości siedziska gwarantuje, że wózek będzie odpowiedni nawet kiedy dziecko podrośnie.

Płynna regulacja kąta nachylenia podnóżków

oraz regulacja wysokości płyty podnóżka. Bardzo

ważne aby nogi miały właściwe ułożenie,

ponieważ to gwarantuje właściwą postawę,

polepsza krążenie, redukuje punktowe





uciski oraz napięcia mięśniowe.

Regulowany kąt rączek

do pchania.

Koła tylne wyciągane

na szybkoślącza.

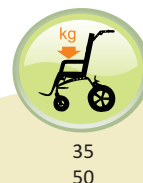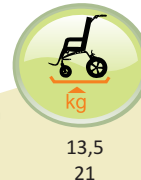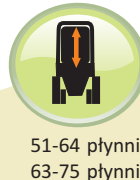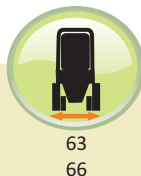

t w o r z y m y n o w e m o ż l i w o ś c i



# GEMINI

...bo szczęście dziecka jest obowiązkiem każdego z nas.

## Stabilizacja tułowia-opcje

Jest kluczowa dla utrzymania prawidłowej postawy i uzyskania prawidłowej stabilizacji, jest również odpowiedzialna za położenie głowy oraz kończyn górnych. Ciągłe dbanie o prawidłową pozycję tułowia przekłada się na wzmocnienie funkcjonalności ciała, minimalizuje możliwość wystąpienia urazów ortopedycznych, minimalizuje napięcia mięśniowe. Dobra stabilizacja tułowia jest istotą prawidłowego oddychania.

Istnieją trzy punkty stabilizacji tułowia: tylna, przednia, boczna.

**Przednia stabilizacja** zapewnia wymagane wsparcie tułowia, odpowiednią stabilność i ruchliwość. Zawsze powinno się ją stosować razem z odpowiednim wsparciem miednicy poprzez odpowiednio wymodelowane siedzisko albo z odpowiednim pasem biodrowym.



U73-kamizelka



U74-\"pajęczek\"



U75-pas udowy



U76-pas biodrowy



U71-wałki boczne

## Stabilizacja kończyn dolnych-opcje



Prawidłowa stabilizacja kończyn dolnych jest konieczna aby utrzymać w miarę prawidłową pozycję uda i kolana. Polepsza krążenie w nogach, eliminuje skreślanie się i przechylenie miednicy, przeciwdziała wysuwaniu się z wózka oraz chroni stopy przed urazami przy spastyce. należy stosować pasy na stopy wraz z pasem biodrowym.

## System STABILO



System siedziska, oparcia i zagłówka wykonany w technologii próżniowej opartej na wysokiej jakości elastycznym neoprenie oraz modyfikowanym granulacie poliestrowym, który poddany długotrwałym ściskaniom nie ulega spłaszczeniu.

W początkowej fazie, kiedy powietrze wypełnia poduszkę, jest ona elastyczna i bardzo dokładnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała osoby siedzącej, gwarantuje w ten sposób równomierny rozkład ciśnienia w każdym punkcie. Następnie poprzez wypompowanie powietrza z wnętrza poduszki można na stałe utrwalić kształt. Im większą próżnię się wytworzy tym poduszka staje się twardsza. Możliwość nieograniczonego formowania i utrwalania kształtu powierzchni poduszki daje znakomite właściwości stabilizacyjne. System stwarza ogromny komfort dla osób z różnymi deformacjami kręgosłupa. Jest niezastąpiony dla osób potrzebujących wsparcia anatomicznej postawy. Zalecany dla osób ze spastyką oraz w profilaktyce przeciwodleżynowej.



# GEMINI

...bo szczęście dziecka jest obowiązkiem każdego z nas.



Możliwość zmiany kierunku jazdy dziecka w gemini I. Ze względów wytrzymałościowych w gemini II nie ma takiej możliwości.



wózek całkowicie składany do transportu nawet w niewielkim samochodzie



Możliwość pozycjonowania dziecka w sposób płynny i łatwy. Komfort i wygoda przede wszystkim.



## pozostałe opcje dodatkowe



U72-regulowany zagłówek



U64-baferka



U63-stolik terapeutyczny



U67-budka przeciw deszczowa



U62-ściwór



U61-torba pod wózkiem



U68-blokada kół przednich

kolory tapicerek:



pomarańczowo-brązowy



żółto-brązowy



zielono-oliwkowy



granatowo-niebieski

