

# Carrot 3

## Fotelik samochodowy

Fotelik Carrot jest najbardziej komfortowym fotelikiem dla dzieci i młodzieży zaczynając już od wieku około 2 lat.

Zaletami fotelika są:

### Skorupa fotelika

Budowa fotelika to atrakcyjna forma i wiele korzyści. Carrot 3 zapewnia bardzo dobre podparcie boczne dla dzieci z problemami mięśniowymi na odcinku głowy, klatki piersiowej, bioder i ud. %cio punktowy system pasów z szeroką poduszką podpierającą klatkę piersiową zapewnia dodatkową pomoc w utrzymaniu właściwej pozycji. Peloty boczne i klin mogą dodatkowo ustabilizować dziecko. Szare poduszki mogą być ułożone w dowolny sposób przyczepiając je rzepami tam gdzie chcemy.

### Rośnie razem z dzieckiem

Wraz ze wzrostem dziecka siedzisko i oparcie fotelika można wydłużać, aż do wzrostu około 160 cm. Małe dzieci mogą ułożyć nogi na dopinanej poduszce. Dodatkowo można skorzystać z regulowanego podnóżka, który zapewni dodatkowe podparcie. Nie istnieje, żaden podobny fotelik, który zapewniałby tak wiele regulacji i elementów dopasowujących się do wzrostu dziecka.

### Niska waga

Carrot 3 waży 8 kg, co jest zaletą gdy jest często przenoszony z samochodu do samochodu lub na podstawę jezdnią.



### Dane techniczne:

Głębokość siedziska: 250-410 mm • Wysokość oparcia: 520-770 mm • Wysokość podnóżka: 250-460 mm • Waga fotelika: ok. 8 kg • Waga użytkownika: ok. 10-50 kg

Fotelik Carrot 3 był testowany zgodnie z normą ECE R44/04 i uzyskał dopuszczenie dla klasy II i III (15-36 kg). Norma ta nie zawiera wskazań dla dzieci o wadze ponad 36 kg, ale Carrot 3 został wyprodukowany dla niepełnosprawnych dzieci o wadze ciała do 50 kg. Został poddany testom zderzeniowym z manekinem o wadze 49 kg. Dodatkowo został poddany testom z manekinem o wadze 10 kg, ponieważ może być używany przez dzieci o wadze poniżej 15 kg. W Niemczech i krajach Unii Europejskiej fotelik Carrot może być użytkowany także w zakresie wagowym 10-15 kg i 36-50 kg, po wskazaniu przez lekarza, że niepełnosprawne dziecko może korzystać z fotelika także poza zakresem wagowym 15-36 kg.

## Budowa modułowa



+



=




**Zestaw Basic S**

**Ochrona ramion  
(150 mm)**


**Zestaw Basic L**

(na zdjęciu z przedłużką siedziska z prętami 50 mm)

**Wymiary w mm**

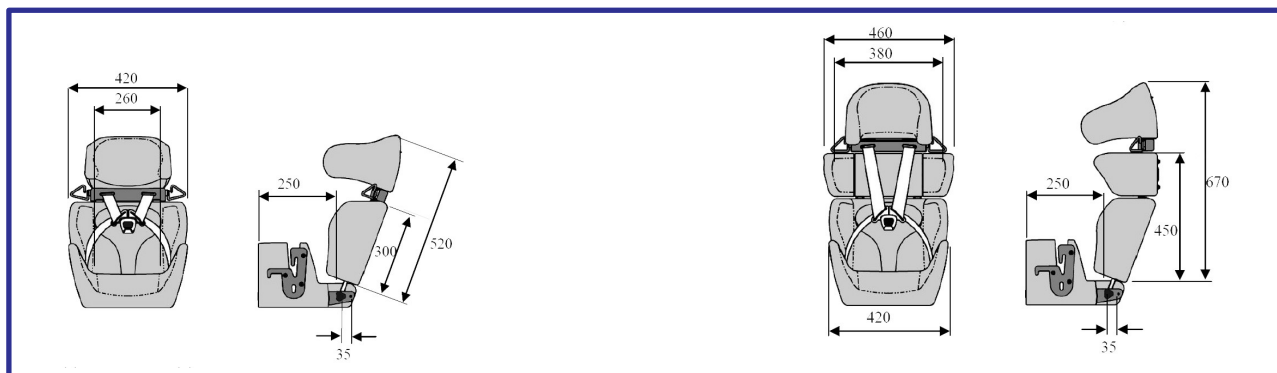

### Elementy powiększające:

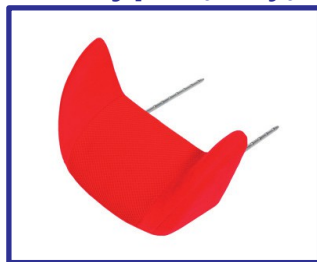


Przedłużka siedziska z prętami 150 mm



Przedłużka z prętami 50 mm



Przedłużka siedziska 50 i 100 mm

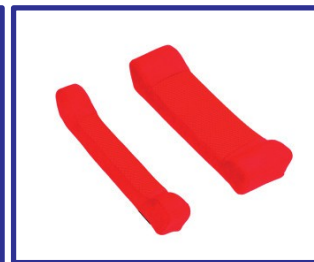

Przedłużka oparcia 50 i 100 mm

### More options



Stolik podpierający



Klin zmieniający kąt siedziska



Zapięcie z zabezpieczeniem



Podnóżki S, M, L



Klin i peloty boczne



Z Multirollerem

Dystrybucja :

Sklep Medyczny REHA-ORT s.c. ul. Grudzińskich 8, 77-400 Złotów tel. 67 263 51 93

e-mail: sklep@reha-ort.pl

## Twoje dziecko rośnie – Carrot rośnie z nim

### Przykładowe konfiguracje:

#### Zestaw Basic S (bez przedłużki oparcia ochrony ramion)



Z przedłużką z prętami L 150 mm  
głębokość siedziska: 450 mm


#### Zestaw Basic

- Siedzisko i oparcie o regulowanej wysokości
- Zestaw poduszek na siedzisko i oparcie
- Dwie poduszki boczne
- Poduszki doczepiane na rzepy
- 5-cio punktowy system pasów
- Wymiękczone podparcie klatki piersiowej
- Zintegrowane podłokietniki
- Uchwyt na pas bezpieczeństwa
- Zdemontowane pokrowce
- Regulacja głębokości zagłówka
- Regulacja głębokości siedziska 35 mm

#### Zestaw Basic L (with shoulder protection wing set)



Regulacja głębokości siedziska 35 mm  
Całkowita głębokość siedziska : 300 mm  
Bez szarych poduszek

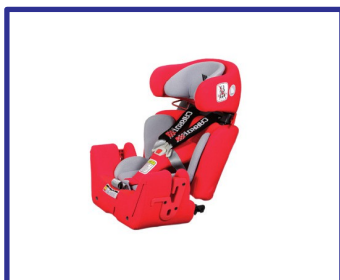


Zestaw Basic z szarymi poduszkami  
Całkowita głębokość siedziska: 250 mm

#### Dostępne kolory

- niebieski
- czarny
- czerwony

#### Akcesoria

- Przedłużka siedziska duża 150 mm
- Przedłużka siedziska z prętami 50 mm
- Przedłużka siedziska 50 mm
- Przedłużka siedziska 100 mm
- Klin zmiany kąta siedziska
- Podnóżek w 3 rozmiarach (S, M, L) regulacja wysokości i pasy na rzepy pod łydki i na stopy
- Stolik
- Poduszka wykonana z tkaniny dystansowej zapewniająca cyrkulację powietrza
- Pas dwupunktowy biodrowy
- Klin
- Peloty boczne
- Podstawa ISO-Base łącząca się z Isofix
- Podstawa obrotowa Isofix ISO-Turn
- Przedłużka oparcia 50 mm
- Przedłużka oparcia 100 mm
- Wzmocnione zapięcie z 40 Nm (standard) do 80 Nm
- Zapięcie z zabezpieczeniem

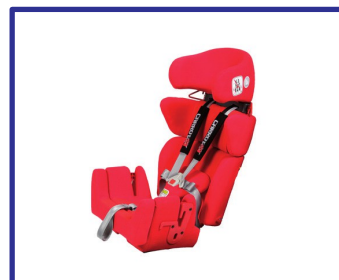

Przedłużka siedziska z prętami 50 mm  
Całkowita głębokość siedziska: 355 mm



Z przedłużką siedziska z prętami 50 mm  
i przedłużką oparcia 50 mm  
Całkowita głębokość siedziska: 305 mm



Z przedłużką siedziska z prętami 50 mm,  
Całkowita głębokość siedziska: 355 mm



Z przedłużką siedziska z prętami 50 mm,  
przedłużką siedziska 50 mm i przedłużką  
oparcia 100 mm.  
Całkowita głębokość siedziska: 360 mm

#### Homologacja

Zgodnie z ECE-044 04 wydane Kraftfahrtbundesamt, No. 04301283, 15-36 kg.  
Pozytywne wyniki testów z manekinami o wadze 10 i 49 kg



Z przedłużką siedziska z prętami 50 mm,  
przedłużką siedziska 50 mm, przedłużką  
oparcia 100 mm.  
Całkowita głębokość siedziska: 410 mm

Dystrybucja :

Sklep Medyczny REHA-ORT s.c. ul. Grudzińskich 8, 77-400 Złotów tel. 67 263 51 93

e-mail: sklep@reha-ort.pl



# ISO-Base i ISO-Turn dla Carrot 3

## Jak najlepiej mogę zabezpieczyć Dziecko w samochodzie?

Wielu rodziców zadaje sobie to pytanie. Solidny, testowany fotelik z ochroną boczną po pierwsze. Po drugie zwiększenie bezpieczeństwa przez użycie systemu Isofix.

## Co to jest ISOFIX?

ISOFIX to międzynarodowy standard w celu mocnego połączenia fotelika z pojazdem. Po bokach fotelika Carrot są dwa stalowe zapięcia które łączą się z uniwersalnymi zaczepami pojazdu. Wielu producentów samochodów od lat oferuje ISOFIX bez dodatkowych opłat. Pojazdy bez systemu ISOFIX mogą być w niego wyposażone ponieważ zazwyczaj znajdują się on w pojeździe. Testy zderzeniowe udowodniły, że użycie systemu ISOFIX znacznie poprawia wsparcie fotelika w samochodzie.

RehaNorm oferuje dwa rozwiązania ISOFIX dla fotelika Carrot 3.

- Podstawa ISO-Base łącząca fotelik z pojazdem
- Podstawa ISO-Turn  
Dodatkowo umożliwia obrót fotelika

Obie podstawy są zalecane i testowane dla osób o wadze ciała do 50 kg.

## Dane:

ISO-Base: DxSxW: 41,7x30,5x8,2 cm

ISO-Turn: DxSxW:50,5x40,0x48,0 cm,  
8 kg, stopa: 35,0-41,0 cm

ISO-Turn może być używany z lewej lub prawej strony. Proszę podać informację przy zamówieniu.

## Podstawa ISO-Base

łączy stalową ramę fotelika z systemem zaczepów ISOFIX pojazdu. Żółta płyta widoczna na zdjęciu redukuje obniżenie fotela samochodu



## Podstawa ISO-Turn

Umożliwia obrót fotelika z użytkownikiem (90 lub 105 stopni z blokadą). Ułatwia to posadzenie osoby na foteliku, gdy waga i rozmiary pasażera utrudniają jego uniesienie. Dodatkowo cały czas mamy możliwość regulacji odchylenia oparcia, które wsparte jest na podpórce. Dodatkowe podparcie zapewnia stopa oparta na podłodze pojazdu.



Podnóżek przypięty do fotelika Carrot



Podnóżek przypięty do podstawy ISO-Turn

Dystrybucja :

Sklep Medyczny REHA-ORT s.c. ul. Grudzińskich 8, 77-400 Złotów tel. 67 263 51 93

e-mail: sklep@reha-ort.pl

# Carrot 3 XL

**Do około 176 cm i od 40 do 75 kg**

Dzieci rosną i rosną, to normalne i tak powinno być. Carrot 3 XL kolejny krok wykonany w celu zapewnienia dziecku fotelika samochodowego, który rośnie razem z nim. Może być używany przez osoby do około 176 cm wzrostu i został przetestowany z manekinem o wadze 75 kg.

Kto posiada już fotelik Carrot 3 potrzebuje jedynie zestaw powiększający do Carrot 3 XL.




W skład zestawu wchodzi:

- szerokie płaskie siedzisko
- dwa dłuższe pręty łączące siedzisko i posiadane oparcie
- pasy stabilizujące H
- pas do przypięcia fotelika do siedzenia pojazdu

Kto nie posiada fotelika Carrot 3, otrzymuje komplet jak na zdjęciu (a), zawierający:

- zestaw XL opisany powyżej
- oparcie Carrot 3 zawierające:
  - zagłówek w rozmiarze L redukujący siłę uderzeń bocznych
  - ochrona ramion, która zapewnia podparcie boczne
  - przedłużkę oparcia o 50 mm (opcjonalnie można przedłużyć oparcie do 20 cm)

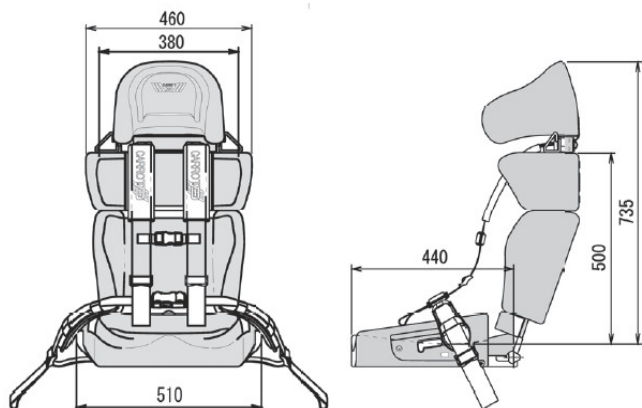

## Akcesoria:

stolik terapeutyczny  
przedłużki oparcia 50 lub 100 mm  
mata trójkątna  
2-punktowy pas biodrowy  
poduszka z tkaniny dystansowej poprawiająca cyrkulację powietrza  
pokrowce nieprzemakalne  
peloty podtrzymujące z regulacją wysokości i szerokości  
poduszki 3D peloty na rzepey  
zapięcie pasów zabezpieczone przed rozpięciem  
połączenie z bazami ISOFIX



Dystrybucja :

Sklep Medyczny REHA-ORT s.c. ul. Grudzińskich 8, 77-400 Złotów tel. 67 263 51 93

e-mail: sklep@reha-ort.pl